


## Bipolare Pinzetten

### Hochfrequenzchirurgie

Bipolare Pinzetten sind chirurgische Instrumente, die über ein geeignetes Kabel mit dem bipolaren Ausgang eines Hochfrequenzgenerators verbunden werden. Im Gegensatz zur monopolaren Technik fliesst der HF-Strom nicht über den Körper. Der Weg des Hochfrequenzstromes ist von der einen zur anderen Pinzettenspitze.

- ✓ Bipolare Pinzetten dienen zum Greifen, Präparieren und Koagulieren von Gewebe
- ✓ ...schränken das Operationstrauma ein
- ✓ ...ermöglichen minimale und schnelle Interventionsmöglichkeiten
- ✓ ...verhindern das Eindringen von Fremdkörpern
- ✓ ...fördern die Patientensicherheit und reduzieren Betriebskosten

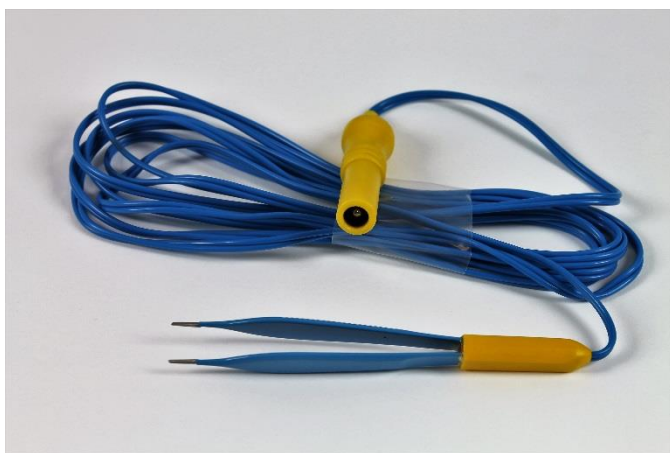

### Bipolare Pinzetten Adson mit Kabel (Einweg)



REF	Inhalt	Länge Kabel	Breite Spitze	Länge Pinzette	Steril	Verpackung	Anz. / Peelpack	Anz. Peelpack/ Karton
8001737	Pinzette Adson Anschluss «Banane»	2.8 m	0.5 mm	12 cm	Ja	Einfach	1	10
8001818	Pinzette Adson Anschluss «Erbe»	2.8 m	0.5 mm	12 cm	Ja	Einfach	1	10