

INFO

MayBa.ch AG SA



JUNI 2019

Newsletter

Unsere Schlagzeilen

NEU: CBM Container- und Siebssysteme

Sicher mit Stil

V-PRO MAX2

Der Beste ist noch besser geworden

Das EM40 Siegelgerät

Mit austauschbarer Box
Neues Konzept

MedZense

Vollspektrum Testsystem
Erweiterte Features

Diateg

Prüfgerät für die absolute Sicherheit Ihrer Patienten

Weichverpackung

Reliance®

Setzen Sie auf SMS

Warm und Kalt

Fors Kühlschränke
Becker Wärmeschrank

NEU: hygiene

Die hygienische (R)evolution für den Umgang mit Ausscheidungen



CBM CONTAINER- UND SIEBSYSTEME MIT EASY FIT

Sicher mit Stil

Qualität
In Ihren
Händen



Ausgestellt an SGSV Tagung
Biel, 19. – 20. Juni 2019



- ✓ **Modell Permaside:** dauerhafter Filter, Mikrobielle Barriere auf 2 Seiten
- ✓ **Modell Protected Valves:** mech. Filtersystem, das keine Wartung erfordert
- ✓ In **3 Materialien** erhältlich: Aluminium weich eloxiert, Aluminium hart eloxiert, Edelstahl (Farben z. T. wählbar)
- ✓ Absolut **schockresistent**
- ✓ **Top Qualität**, 70 Jahre Erfahrung
- ✓ **Easy Fit:** durchdachte Fixierungssysteme, **kundenspezifische** Lösungen möglich, **CE** klassifiziert
- ✓ Grosse Auswahl an **Lochblechsieben und Zubehör**

V-PRO MAX2

Niedertemperatursterilisation

Ausgestellt an SGSV Tagung
Biel, 19. – 20. Juni 2019



LEISTUNGSSTARK, ZUVERLÄSSIG und SICHER

- ✓ Maximale Benutzerfreundlichkeit
- ✓ Aussergewöhnliche Konditionierungsphase und intelligenter Speicher im V-PRO™ Sterilisator Verhindern Abbrüche und unnötigen Verlust von Sterilisationsmittel
- ✓ Moderne Steuerung mit Datenverbindung zu **Connect Assure**
- ✓ Öffnen der Türe über Fusspedal

Gesamtabmessungen
(BxTxH)

Eintürig Einbau:
838 x 962 x 1908 mm
Eintürig Schrank:
838 x 973 x 1908 mm
Zweitürig Einbau:
838 x 1010 x 1908 mm

Kammergrösse

432 x 381 x 826 mm

Nutzvolumen Kammer

136 L

Branchenführende Zyklusleistung

Schneller Nicht-Lumen-Zyklus	Nicht-Lumen-Zyklus	Flexibler Zyklus	Lumenzyklus
<p>16 Minuten</p> <p>5 KG</p>	<p>28 Minuten</p> <p>22,7 KG</p>	<p>35 Minuten</p> <p>10,9 KG</p>	<p>55 Minuten</p> <p>6,9 KG</p>
<p>Validierte gängige Produkte Erleben Sie die Geschwindigkeit des innovativen schnellen Nicht-Lumen-Zyklus und bereiten Sie Produkte in nur 16 Min. auf, z. B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kameras • Teleskope • Akkus • Laryngoskopklingen 		<p>2 flexible Endoskope oder 1 Endoskop und Nicht-Lumen-Charge (insgesamt 11 kg)</p>	<p>20 Edelstahlprodukte mit Lumen (mit einem, zwei oder drei Kanälen)</p>

DAS NEUE SIEGELGERÄT

Entrhal Siegelgerät EM40 mit austauschbarer Box

Dank 30 Jahre Erfahrung in Siegelgeräteherstellung hat unser Geschäftspartner Entrhal ein cleveres System entwickelt, das Ihnen zahlreiche Vorteile bringen wird:

Ausgestellt an SGSV Tagung
Biel, 19. – 20. Juni 2019



- **Austauschbare** EM Box (Mechanische Siegeleinheit). Der Austausch ist durch den Anwender in weniger als 10 Minuten realisierbar
- **Keine** unnötigen **Transportwege** für Ihre wertvolle Elektronik
- Beim Austausch der EM Box bleiben alle Ihre Einstellungen und Daten bei Ihnen erhalten



- Neues, **innovatives** Design
- Leichte Bedienung durch den **neuen Touchscreen** und die vorinstallierten Siegeleinstellungen
- Spiegelfreie Anzeige
- **Integrierter Tintenstrahl Drucker** mit bis zu 4 Linien für Text-, Logo- und Barcode-Druck



Sichere jährliche Validierung, ohne Verlust von Daten und Einstellungen

- Für die Validierung senden wir Ihnen eine Leih EM Box.
- Sie senden uns Ihre EM Box zu
- Wir kontrollieren und validieren Ihre EM Box und senden Ihnen diese zurück
- Sie setzen diese in Ihr Gerät ein und senden uns die Leih EM Box zurück



MedZense

Universelles Vollspektrum Test-System

**Bald mit
neuer
Instrumenten-
Management-
Software**



ERWEITERTE FEATURES

I ENDOEYE Messgerät

Mit der optionalen ENDOEYE Testfunktion können Sie die Lichtübertragung Ihrer ENDOEYE Video Laparoskopie testen. Das MedZense LG20-e ist das einzige Produkt auf dem Markt mit dieser Funktion. Die Ergebnisse unserer Feldforschung zeigt, dass sich die Lichtdurchlässigkeit von ENDOEYE Video Laparoskopie im Laufe der Zeit deutlich verschlechtert. Diese Funktion ist als Software Update erhältlich.

II USB Anschluss

Der MedZense LG20 kann über USB mit einem Computer verbunden werden. Dies bietet die Möglichkeit, Ergebnisse auf Instrumentenebene zu testen und zu verfolgen. Eine Software zur Erfassung und Analyse dieser Daten gewährleistet eine strukturierte Qualitätskontrolle. Die Software kann in Ihr bestehendes System integriert werden.



**Ausgestellt an SGSV Tagung
Biel, 19. – 20. Juni 2019**



Funktionen Kabel Messgerät

- ✓ Lichtdurchsatzmessung für Glasfaserkabel
- ✓ Messung des Farbspektrums
- ✓ Einfacher und erweiterter Modus
- ✓ Mehrsprachige Benutzeroberfläche
- ✓ Benutzerdefinierte Grenzwerteinstellungen
- ✓ Unterstützt alle wichtigen Kabelanschlüsse

Funktionen Endoskop Messgerät

- ✓ Lichtdurchsatzmessung für Spiegelungsgeräte
- ✓ Messung des Farbspektrums
- ✓ Starre Endoskope bis zu Ø 10 mm testen


Einzel (zur Aufrüstung) oder zusammen mit dem Kabel Messgerät als Vollspektrum Test-System erhältlich: MedZense LG20-e

Die Sicherheit Ihrer Patienten geht vor

Lassen Sie nichts anbrennen...

DAS PROBLEM

Laut einer Studie weisen rund 20 % der Instrumente (Isolation) Risse, Löcher oder Luftblasen auf. Die Hälfte dieser Defekte ist von bloßem Auge nicht erkennbar. Mit unseren Prüfgeräten verringern Sie das Patientenrisiko.

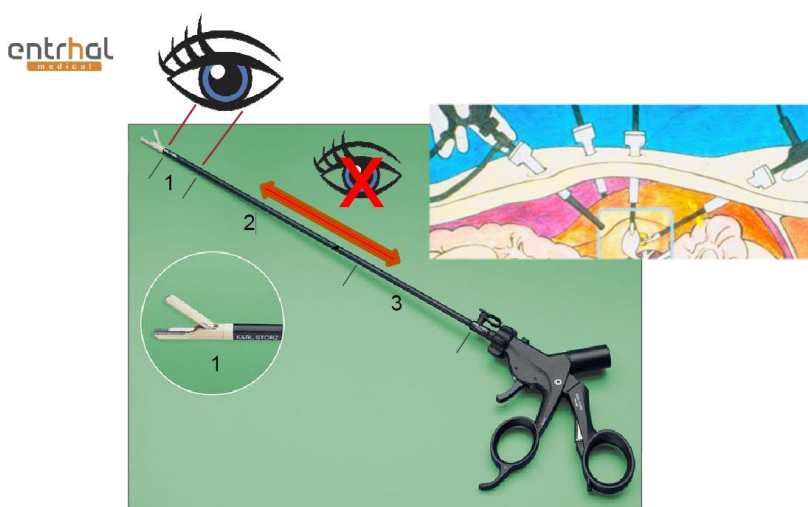

Ergebnisse der Studie:

Insgesamt wurden 761 Instrumente getestet

Gebiet 1: 88 Instrumente (11,5 %)

Gebiet 2: 48 Instrumente (6,3 %)

Gebiet 3: 32 Instrumente (4,2 %)

168 Instrumente (22,1 %) mit Isolationsdefekt!

Fazit: Die Sichtkontrolle von laparoskopischen Schaftinstrumenten reicht nicht aus, um alle defekten Instrumente zu erkennen, die für Patienten ein Risiko darstellen können.

DIATEG Professional – Isolationsprüfgerät

DIE LÖSUNG



- DIATEG Professional entdeckt kleinste Schäden in der Isolation
- Testet alle gängigen elektrochirurgischen Instrumente
- Ein Defekt wird akustisch und optisch dargestellt
- Das Unfallrisiko für Patient und Operateur wird deutlich verringert
- Die Bedienung ist sicher und sehr einfach
- Unterstützt durch Aesculap
- Flexible Elektrode „Push“-„Pull“

Ausgestellt an SGSV Tagung
Biel, 19. – 20. Juni 2019

Unsere SMS Verpackungsbögen

Ausgestellt an SGSV Tagung
Biel, 19. – 20. Juni 2019

NEU: Reliance® Tandem SMS RT 844 845 846

2 x SMS. Spinnvlies-Meltblownvlies-Spinnvlies



Hergestellt aus **Polypropylengranulat**
Für die sequentielle Verpackung

Technologie: SMS + SMS (SMMMS)

Sterilisationsverfahren: Dampf, Ethylenoxid, Wasserstoffperoxid H₂O₂

Reliance® Tandem 735 745 765

Kombination aus SMS + Vlies in einem Produkt vereint




Die interleaved Lösung für Sterilbarriere-Systeme
Für die sequentielle Verpackung

Technologie: Nassgelegter Vlies + SMS (SMMMS)

Sterilisationsverfahren: Dampf, Ethylenoxid

Reliance® 440 450 460

SMS. Spinnvlies-Meltblownvlies-Spinnvlies

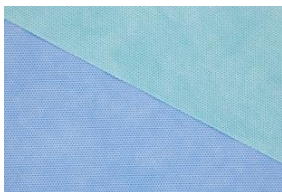

Hergestellt aus **Polypropylengranulat**
Für die einfache Verpackung

Technologie: SMS (SMMMS)

Sterilisationsverfahren: Dampf, Ethylenoxid, Wasserstoffperoxid H₂O₂

Reliance® 844 855 866

SOLO. Versiegelte Doppelbögen in **1 Arbeitsgang**



Hergestellt aus **Polypropylengranulat**, gehören Reliance Solo zu den
sichersten Verpackungsbögen

Technologie: SMS + SMS (SMMMS)

Sterilisationsverfahren: Dampf, Ethylenoxid, Wasserstoffperoxid H₂O₂

Farben: grün-blau zweifarbig zur leichten Identifizierung

Grammaturen

Farben	Flächengewicht	Verwendung	Grössen in cm
Grün, Blau	43 g/m ² bis 67 g/m ²	Siebe mit sehr leichtem bis sehr schwerem Gewicht	50 x 50 bis 150 x 188

Kalt oder warm, wir haben die Lösung für Sie

Die FORS Mediline Kühl-, Tiefkühlschränke, sowie die BECKER Wärmeschränke lassen sich perfekt in unser Becker Mobiliar System einbauen. Wir arbeiten Hand in Hand mit Planungsbüros, Architekten und Anwendern.



KÜHLSCHRANK COOLMED-G 8260 (FORS) Medikamenten Kühlschrank Unterbau, ventiliert – DIN 58345

Sollwerteinstellung fix auf + 5 °C
Umluftkühlung, Farbe weiss


Aussenmasse: 82 x 59.7 x 61.5 cm
Innenmasse: 67 x 44 x 43.5 cm
Brutto- /Nutzinhalt: 141/109 l
Belastbarkeit Ablageflächen: 45 kg
Option: Alarm per SMS möglich



WÄRMEHOCHSCHRANK (BECKER)

Für Infusionen, Kochsalzlösungen, Tücher
Stahlblech pulverbeschichtet, Farbe wählbar

Die Wärmeeinrichtung entspricht der EMV-Richtlinie 89/336/EEC und der Niederspannungsrichtlinie 72/23/EEC über die elektrische Sicherheit und wird – je nach Kundenwunsch – in die verschiedensten Möbel der Becker Modellreihen integriert. Voreinstellung auf 35 °C. Nachfolgend 3 Beispiele:

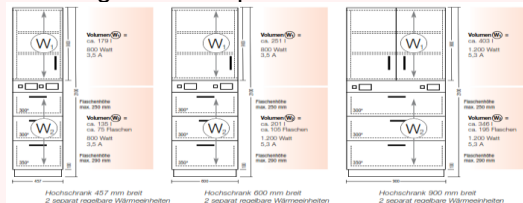

DIE HYGIENISCHE (R)EVOLUTION

Für den Umgang mit Körperflüssigkeiten direkt beim Patienten

Ihr Gewinn

- ✓ Kein Transport von flüssigen Ausscheidungen
- ✓ Verringerung von Kreuzkontaminationen
- ✓ Optimale Lösung für Isolationspatienten
- ✓ Zeitersparnis
- ✓ Keine Spritzer
- ✓ Praktisch kein Geruch
- ✓ Komplette oder teilweise in Ihr bestehendes Sortiment integrierbar
- ✓ Keine Investition, kein Unterhalt
- ✓ Kostenlose Schulung durch MayBa.ch Fachberater, Zeitaufwand ca. 30 min

